


干式荧光 免疫分析平台



DFIA100性能参数

检测模式: 荧光免疫定量分析
检测通道: 单通道
样本类型: 血清、血浆、全血等
检测方式: 支持一卡一项、一卡多项
数据处理: 支持LIS连接, 传送数据及导出
结果打印: 内置热敏打印机
显示屏: 7英寸触摸屏
电源输入: 220V, 50~60Hz
尺寸: 200×346×144mm
重量: 2.8Kg

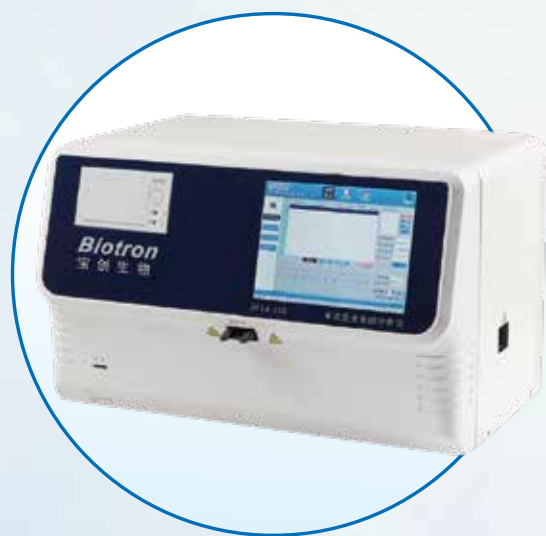

DFIA200性能参数

检测模式: 荧光免疫定量分析
检测通道: 转盘式12通道
样本类型: 血清、血浆、全血等
检测方式: 支持一卡一项、一卡多项
数据处理: 支持LIS连接, 传送数据及导出
结果打印: 内置热敏打印机
显示屏: 8英寸彩色屏
电源输入: 220V, 50~60Hz
尺寸: 470×320×315mm
重量: 16Kg



多项目可选，检测菜单丰富

不断延展的项目菜单，单人份试剂条包装，支持单项或多项目联检。

使用时间分辨荧光纳米微球，性能优越

使用自有核心技术的镧系元素标记纳米微球，荧光持续时间长，Stokes位移大，灵敏度高，特异性强，不受背景干扰。

自带打印，可选LIS/HIS系统

自带热敏打印机，便于临床使用；可连接LIS/HIS系统，自动传输数据。



支持多种样本类型，应用广泛

适用于全血/血清/血浆检测，可用于门诊、急诊、临床及胸痛中心等多种应用场景。

反应时间短，常温储存，使用便捷

最快3min出结果，便捷高效；4-30°C，有效期长达18个月，储运方便。

不同通道可选，配置灵活

可根据开展项目和样本量灵活选用不同通道产品，仪器维护简单。



广州市宝创生物技术有限公司

地址：广州市黄埔区开源大道11号科技企业加速器C6栋301室、401室

电话：020-32077730 / 020-32077731 传真：020-32077729 网址：www.ebiotron.com